


## Apple उपकरणहरूमा अफलाइन कार्यतालिका प्रयोग गरेर कन्फिगरेसन, चेक-इन तथा चेक-आउट

अफलाइन कार्यतालिका एप्लिकेसन जसले प्रयोगकर्तासँग तत्काल इन्टरनेट जडानको पहुँच नहुँदा उनीहरूलाई कार्यतालिका स्लटहरूबाट चेक इन र आउट गर्ने प्रकार्यता प्रदान गर्छ। **Offline EVV Configuration (अफलाइन EVV कन्फिगरेसन)** विकल्प Dashboard (ड्याशबोर्ड) मा उपलब्ध हुनेछ र यसमा PIN (पिन) प्रविष्ट गरेर अफलाइन खाता सक्रिय गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो विकल्प ती व्यक्तिहरूका लागि उपलब्ध हुनेछ जसले आफ्नो एजेन्सीमा Offline Scheduling (अफलाइन कार्यतालिका) सक्षम गरेका छन्।

- अफलाइन EVV कन्फिगरेसन
- कार्यतालिका र चेक-इन/चेक-आउट स्लट सिर्जना गर्नुहोस्
- अनलाइन स्लटहरूलाई अफलाइन मोडमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्
- अफलाइन EVV स्लटहरू अपलोड गर्नुहोस्
- वेबमा अफलाइन EVV स्लटहरू खोजी गर्नुहोस्

## अफलाइन EVV कन्फिगरेसन

1. यदि एजेन्सीको लागि सक्षम गरिएको छ भने **Offline EVV Configuration** (अफलाइन EVV कन्फिगरेसन) को विकल्प Dashboard (ड्याशबोर्ड) मा देखापर्छ।

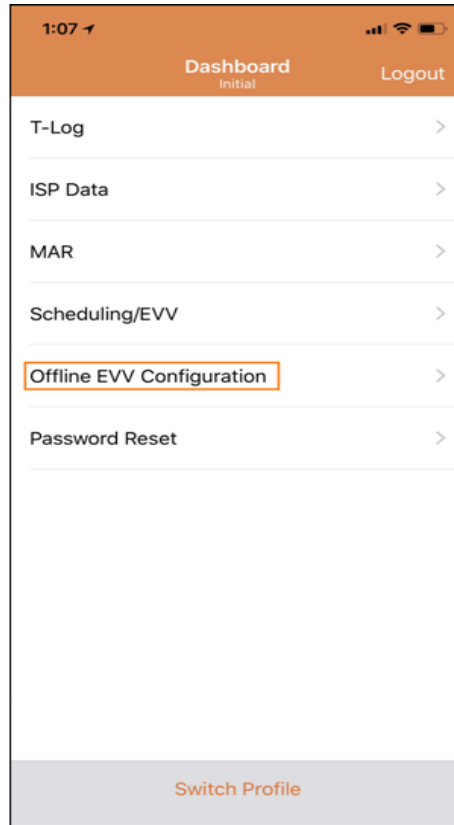

2. **Offline EVV Configuration** (अफलाइन EVV कन्फिगरेसन) लिंक चयन गरिएपछि, अफलाइन खाता PIN (पिन) प्रविष्ट गरेर सक्रिय गर्न सकिन्छ।

1:08

< Dashboard Configuration

Please set your offline PIN below to enable offline mode

Login Name harris


Provider Code DEMO-TH

..... SHOW

..... SHOW

SET PIN

3. अफलाइन मोड सक्रिय भएपछि सफल भयो भन्ने सन्देश देखा पर्नेछ।

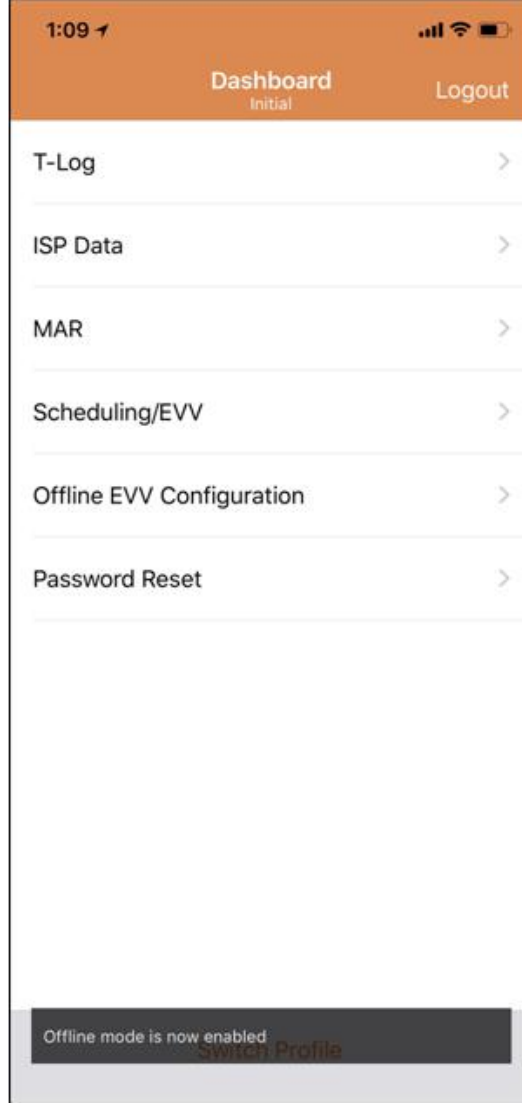

4. Offline Scheduling (अफलाइन कार्यतालिका) कन्फिगर भएपछि Login (लग इन) पृष्ठमा **Switch to Offline Login** (अफलाइन लग इनमा स्विच गर्नुहोस्) लिंक देखा पर्नेछ।

1:09 1

Therap<sup>®</sup>

Login Name

Password

DEMO-TH

Login

[Switch to Offline Login](#)

Version 6.0  
© Therap Services 2003-2019. All Rights Reserved.

5. **Switch to Offline Login** (अफलाइन लग इनमा स्विच गर्नुहोस्) लिंकमा क्लिक गरेपछि प्रयोगकर्ताले offline EVV login (अफलाइन EVV लग इन) पृष्ठ पहुँच गर्न सक्नेछन् जहाँ उनीहरूले आफ्नो PIN (पिन) प्रविष्ट गर्न सक्छन् र त्यसपछि अफलाइन एप्लिकेसनमा लग इन गर्न सक्छन्।

1:09

Therap®

Offline EVV Login

Login Name

Offline PIN

DEMO-TH


Offline Login

Switch to Online Login

Version 6.0  
© Therap Services 2003-2019. All Rights Reserved.

कार्यतालिका र चेक-इन/चेक-आउट स्लट सिर्जना गर्नुहोस्

1. Scheduling Offline (अफलाइन कार्यतालिका) एप्लिकेसनमा लग इन भएपछि, नयाँ स्लटहरू थप्नका लागि **Add New Slot** (नयाँ स्लट थप्नुहोस्) बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

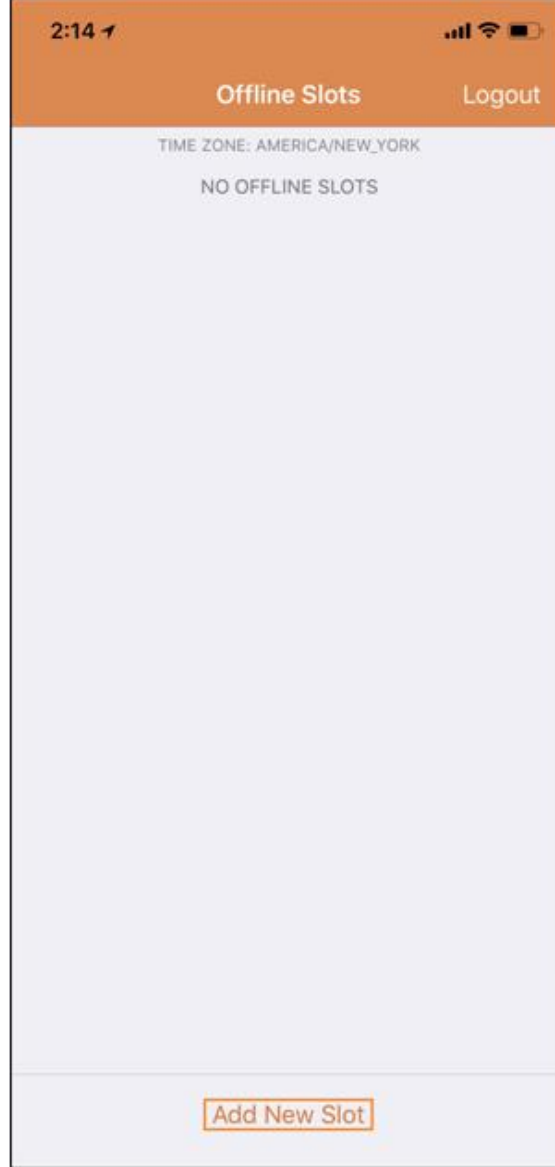

2. **Print Schedule** (अफलाइन कार्यतालिका) लिंकमा क्लिक गरेर वेब एप्लिकेसनबाट Slot ID (स्लट ID) प्राप्त गर्न सकिन्छ।

**Schedule**

- View/Check-In
- Self Scheduling
- Print Schedule**
- Search

Mon, 11/23/2020	Tue, 11/24/2020	Wed, 11/25/2020	Thu, 11/26/2020	Fri, 11/27/2020	Sat, 11/28/2020	Sun, 11/29/2020
		07:00 am - 09:00 am 138-776-5 (I) Johnson, Isabella / 12345 : Home Health Aide / T1021, Cole, Mia / Direct Support Professional  11:00 am - 12:00 pm 138-776-7 (I) Miller, Alexander : Personal Care Assistance / T1019, Cole, Mia / Direct Support Professional				



3. तपाईं जुन कार्यतालिकाको लागि अफलाइन मोड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको Slot ID (स्लट ID) प्रविष्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि **OK (हुन्छ)** मा क्लिक गर्नुहोस्।

2:14

Offline Slots Logout

TIME ZONE: AMERICA/NEW\_YORK

NO OFFLINE SLOTS

**Enter Slot ID**  
Please enter your offline Slot ID

111-11

Cancel OK

1 2 3  
ABC DEF

4 5 6  
GHI JKL MNO

7 8 9  
PQRS TUV WXYZ

0

4. Slot ID (स्लट ID) प्रविष्टि गरेपछि, pending Check-In (विचाराधीन चेक-इन) र pending Check-Out (विचाराधीन चेक आउट) सहित तय गरिएका स्लटहरू सिर्जना हुनेछन्।


Offline Slots Logout

DEVICE TIME ZONE: AMERICA/NEW\_YORK


111-11  
Check-In  
Check-Out

Add New Slot

5. स्लटहरू अफलाइन मोडबाट पनि मेटाउन सकिन्छ जसमा Check-in/Check-out (चेक-इन/चेक-आउट) कार्यहरू गरिएको छैन। बायाँतर्फ स्वाइप गर्नाले स्लट अफलाइन मोडबाट मेटिनेछ।

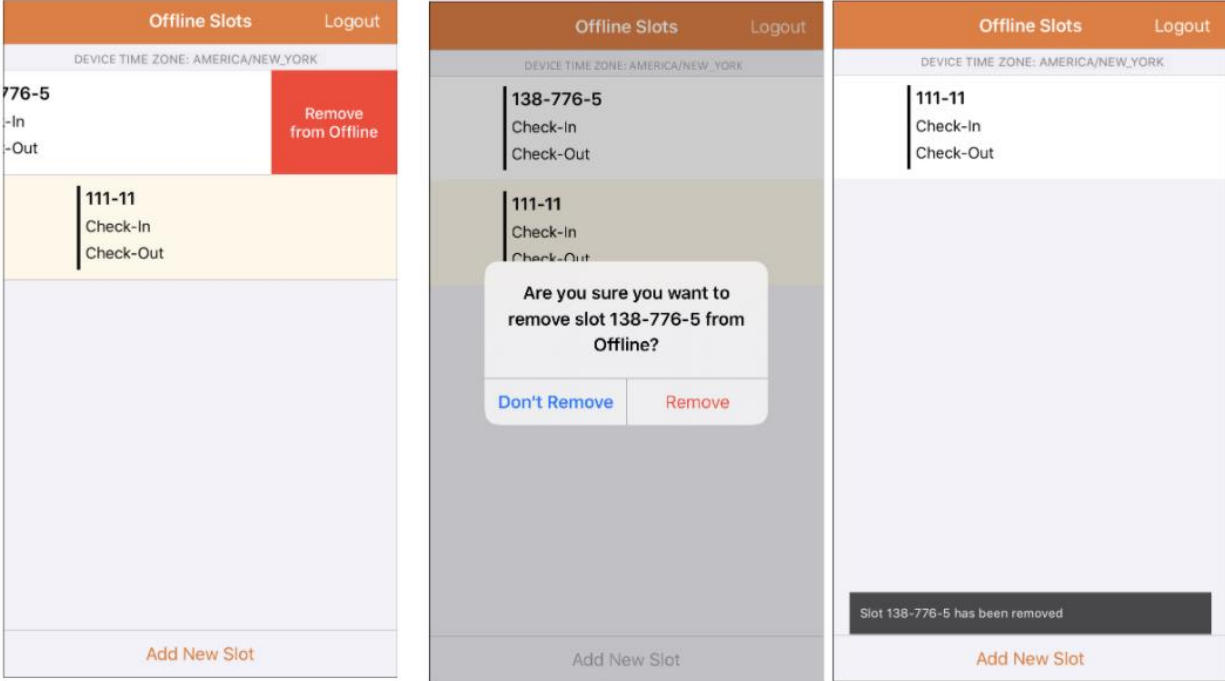

6. कार्यतालिका चयन गर्नाले **Check-In (चेक-इन)**, **Check-Out (चेक-आउट)** र **Cancel (रद्द गर्नुहोस्)** लिंकहरूमा सन्देश प्रदर्शन गर्नेछ। स्लटको लागि चेक इन गर्नका लागि **Check-In (चेक-इन)** चयन गर्नुहोस्। स्लटको लागि चेक इन गर्नका लागि **Check-In (चेक-इन)** गर्नुहोस्। **Cancel (रद्द गर्नुहोस्)** लिंकले तपाईंलाई चेक इन वा चेक आउट नगरिकनै स्लटबाट बाहिरिन दिन्छ।

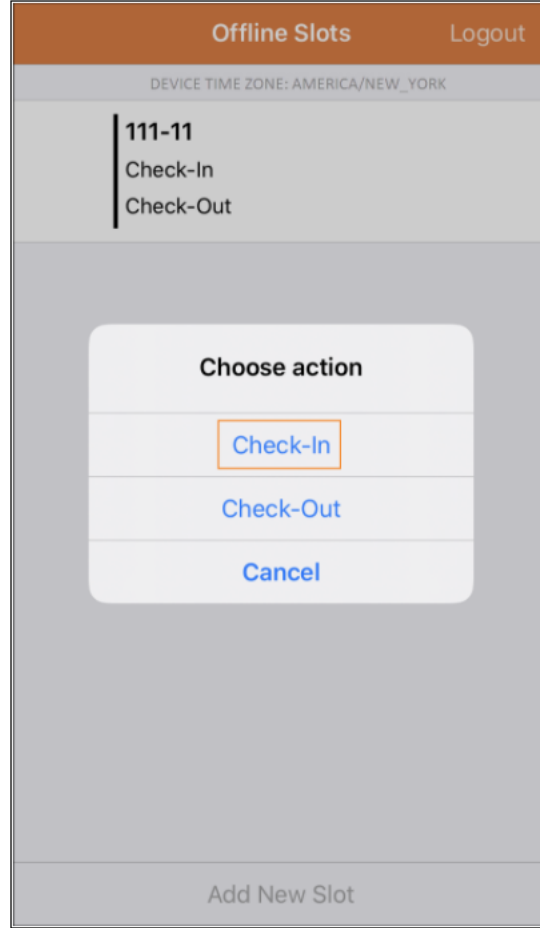

7. प्रयोगकर्ताहरूले कार्यतालिका स्लटहरूमा **Check-In (चेक-इन)** र/वा **Check-Out (चेक आउट)** लिंक क्लिक गरेपछि चेक-इन गर्ने र/वा चेक-आउट गर्ने मिति र समय प्रदर्शन हुनेछ।

Offline Slots Logout

DEVICE TIME ZONE: AMERICA/NEW\_YORK

<b>111-11</b>	
Check-In	12/20/2020 02:15 PM
Check-Out	

[Add New Slot](#)

8. Scheduling/EVV (कार्यतालिका/EVV) अफलाइन एप्लिकेसन प्रयोग गरेर नयाँ कार्यतालिका स्लट प्रविष्ट गरिएमा स्क्रिन स्वतः थपिएको नयाँ स्लटमा स्क्रोल हुनेछ। नयाँ स्लट पनि हाइलाइट हुनेछ।

Offline Slots Logout


DEVICE TIME ZONE: AMERICA/NEW\_YORK

111-11  
Check-In  
Check-Out

111-12  
Check-In  
Check-Out

Add New Slot




9. Scheduling/EVV (कार्यतालिका बनाउँदै/EVV) मोड्युलको अफलाइन एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा निष्क्रियताले गर्दा हुने सत्रको समय समाप्ती 30 मिनेट तय गरिएको छ। अफलाइन सत्रको समय समाप्त हुनुपूर्व एउटा पपअप सन्देश देखा पर्नेछ।

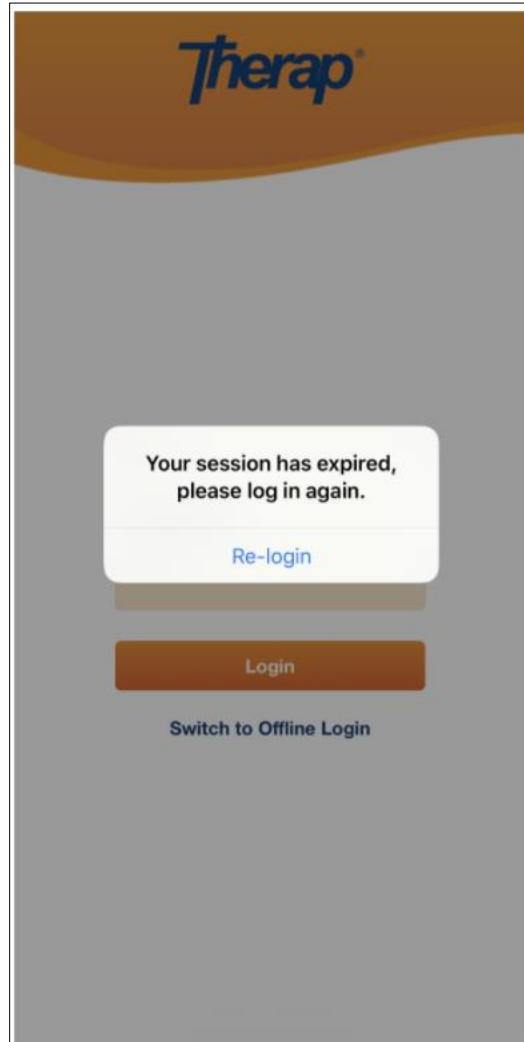

## अनलाइन स्लटहरूलाई अफलाइन मोडमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्



1. Online (अनलाइन) बाट Offline (अफलाइन) मोडमा स्लट थपका लागि 'Add to Offline' (अफलाइनमा थप्नुहोस्) विकल्प कार्यान्वयन गरिएको छ।

- दायाँतर्फ स्वाइप गर्नाले स्लट अफलाइन मोडमा स्थानान्तरण हुनेछ।
- स्लट अफलाइन मोडमा थपिएपछि एउटा सफल भयो भन्ने सन्देश देखा पर्नेछ।
- अफलाइन मोडमा पहिले नै थपिसकिएको सल्टमा बायाँतर्फको सुरुवात समय खैरो रङ्गको हुनेछ।
- अफलाइन मोडमा थपिएका स्लटहरूका लागि सुरुवात समय र अन्त्य समय प्रदर्शन गरिनेछ।

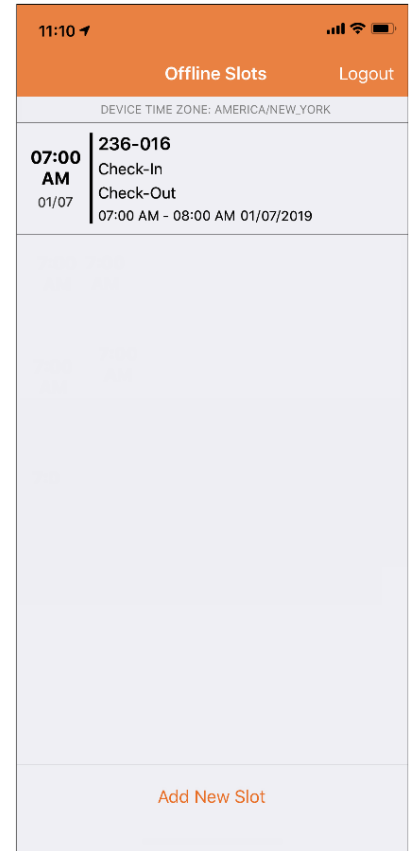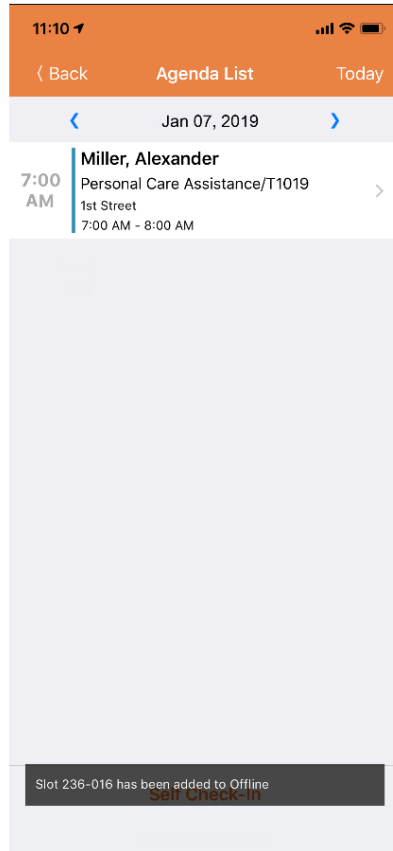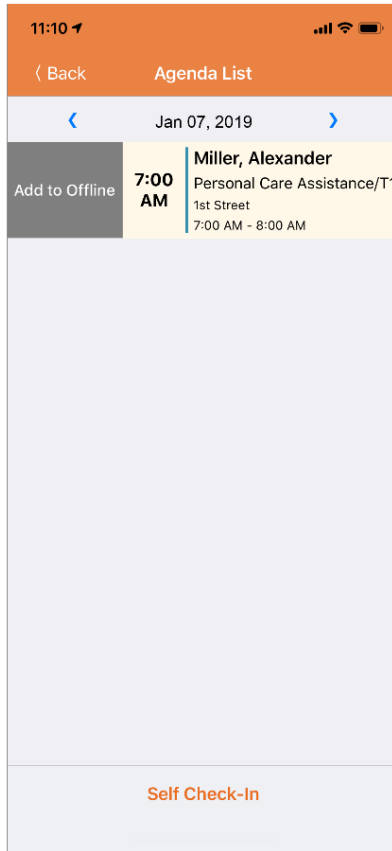


2. यदि प्रयोगकर्ताले विगतमा Offline Slots (अफलाइन स्लटहरू) मा थपिसकिएको Slot ID (स्लट ID) थपेमा, उक्त Slot ID (स्लट ID) हाइलाइट हुनेछ।



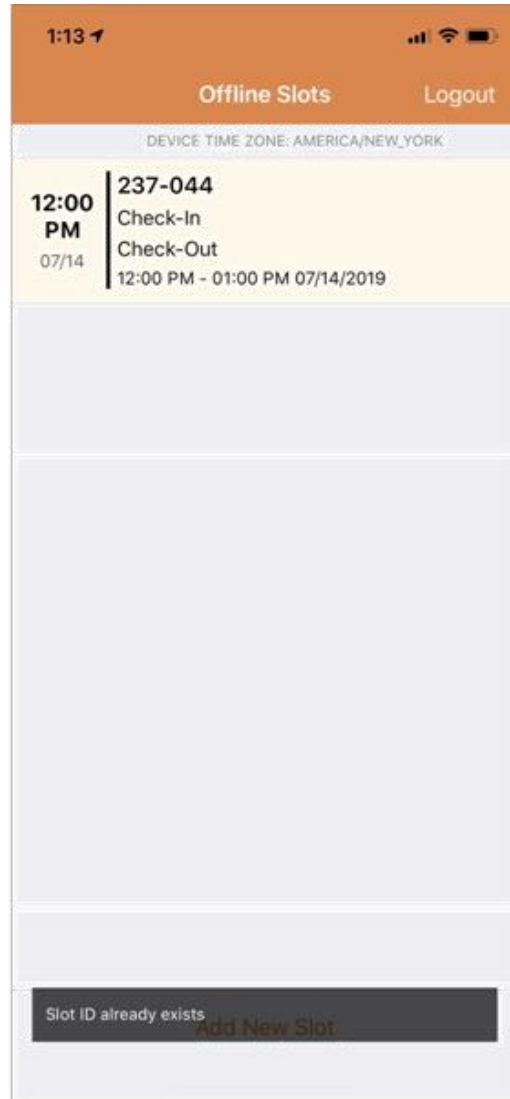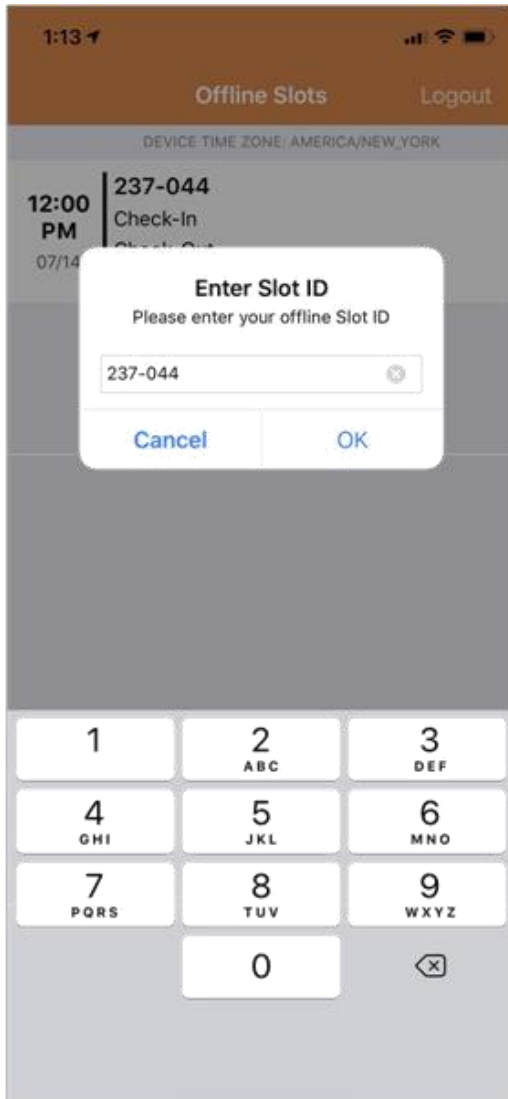


## Offline EVV Slots (अफलाइन EVV स्लटहरू) अपलोड गर्नुहोस्

1. अफलाइन कार्यतालिका एप्लिकेसन प्रयोग गरेर सेवाहरूको लागि चेक इन र चेक आउट गरेका प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूले इन्टरनेटबाट Therap मोबाइल एप्लिकेसनमा लग इन गरेपछि आफ्नो EVV data (EVV लगत) अपलोड गर्ने सन्देश प्रदर्शन गरिनेछ।

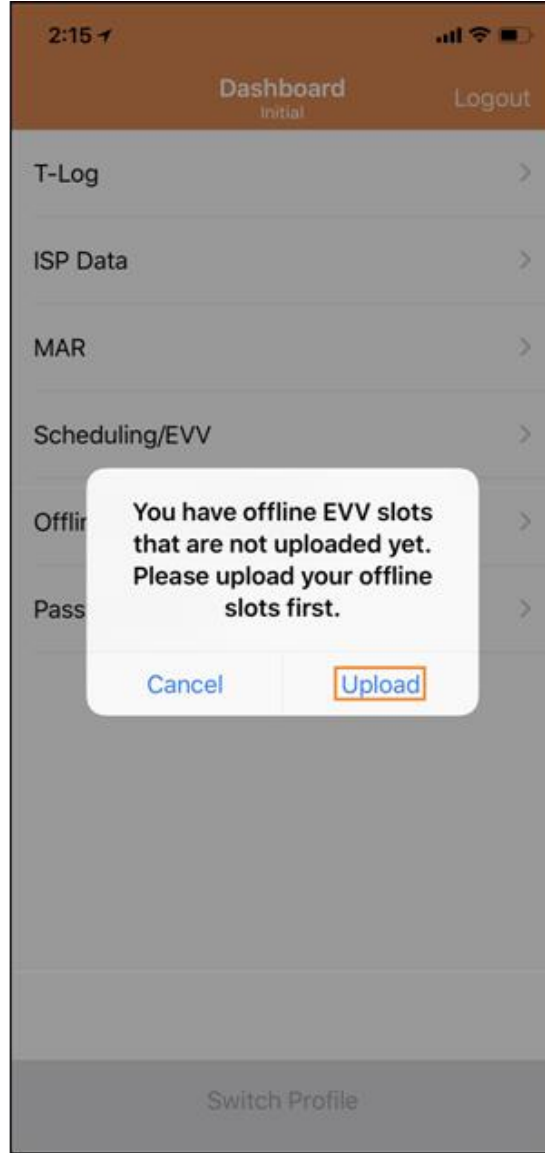

2. तपाईंले **Upload (अपलोड)** बटनमा क्लिक गरेपछि प्रणालीमा अफलाइन डाटा अपलोड गरिनेछ। अफलाइन डाटा अपलोड भएपछि सफल भयो भन्ने सन्देश देखा पर्नेछ। अफलाइन डाटाको प्रक्रिया हुन 30 मिनेटसम्म लाग्न सक्नेछ।

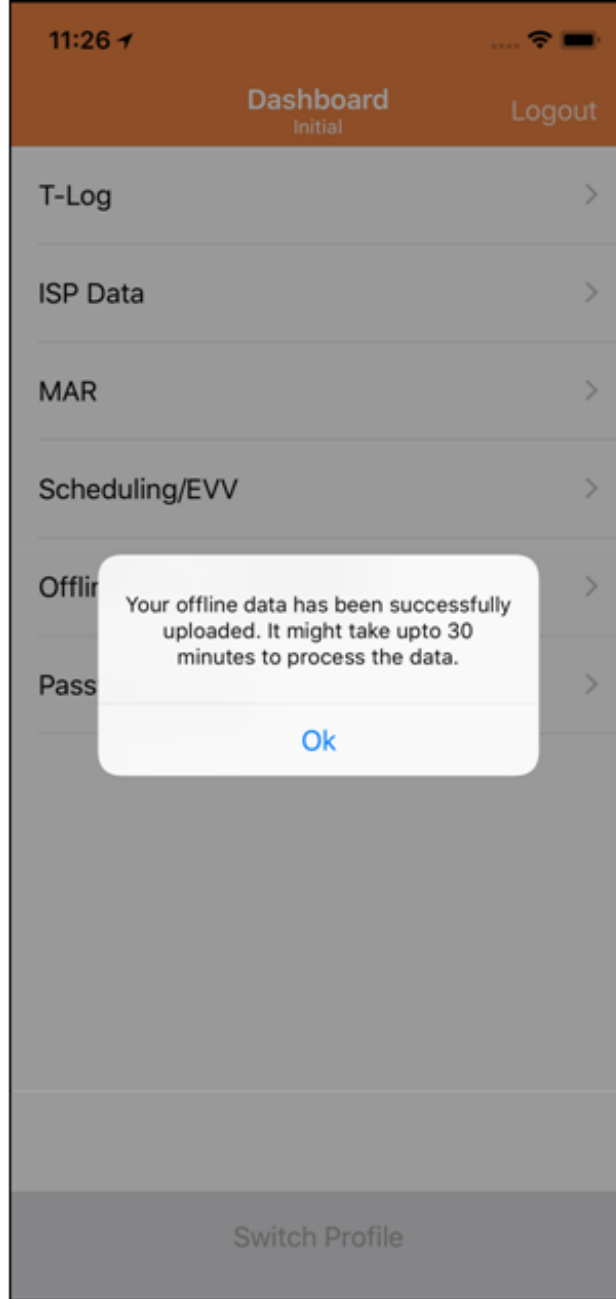

## वेबमा Offline EVV Slots (अफलाइन EVV स्लटहरू) खोजी गर्नुहोस्

1. Agency (एजेन्सी) ट्याबको Scheduling (कार्यतालिका) खण्डमा गएर **Search Offline Events** (अफलाइन कार्यक्रम खोजी गर्नुहोस्) लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।

To Do	<h2>Scheduling</h2> <hr/> <p>Schedule <span style="float: right;">Create/Edit   Templates   Search   <b>Search Offline Events</b> Release Schedule</span></p>
Individual	
Health	
<b>Agency</b>	

2. Schedule Offline Event Search (अफलाइन कार्यक्रम खोजी तय गर्नुहोस्) पृष्ठमा आवश्यक विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र **Search (खोजी)** बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।

### Schedule Offline Event Search

Form ID, Slot Date or Event Date range required

Slot Start Date From: 10/09/2019

To: 10/16/2019

Event Date From: 10/09/2019

To: 10/16/2019

Staff: Search

Form ID:

Event: - Please Select -

Status: - Please Select -

The Status field will be set to Failed initially. Use the drop-down option to select other options.

Clear Selection

Cancel Search

- त्यसपछि Schedule Offline Event Search (अफलाइन कार्यक्रम कार्यतालिका खोजी) पृष्ठले Offline EVV Slots (अफलाइन EVV स्लटहरू) को सूची देखाउनेछ। उक्त Check-In/Out (चेक-इन/आउट) गतिविधिको लागि Schedule Slot (कार्यतालिका स्लट) फारम खोल्नका लागि पङ्क्तिमा क्लिक गर्नुहोस्।

### Schedule Offline Event Search

15 Records

Slot ID	Start Date	End Date	Event Date	Event	Staff	Latitude	Longitude
715-298	10/16/2019 10:00 AM	10/16/2019 11:00 AM	10/16/2019 09:52 AM	Check-Out	Hill, Matthew / Supervisor	23.791529	90.401
715-298	10/16/2019 10:00 AM	10/16/2019 11:00 AM	10/16/2019 11:12 AM	Check-In	Hill, Matthew / Supervisor	23.791529	90.401

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous
1
Next

[New Search](#)
 [Export to Excel](#)

Cancel
Back